

## Протокол проведения испытаний № РМ120/86

**Материал:** Говяжья кость

### Раздел 1. Постановка задачи.

**1.1 Основные свойства исходного материала:** Сухой, очищенный, хрупкий, влажность менее 15%;

**1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Стержни 8x8x100 мм и частицы крупностью менее 30 мм;

**1.3 Поставленная задача:** Измельчить материал до крупности менее 3 мм;

**1.4 Производительность:** 1 кг/час;

**1.5 Используемое оборудование:**



Рис 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис 2. Анализатор А 20

### Раздел 2. Проведение испытаний.

**2.1 Измельчение на Роторной мельнице РМ 120.**

**2.1.1 Вес пробы:** 17.7 гр.;

**2.1.2 Время измельчения:** 30 сек.;

**2.1.3 Производительность:** 2 кг/час.

## 2.2. Результат:



Рис.3. Материал до измельчения

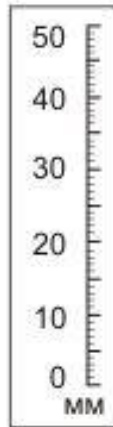


Рис.4. Продукт измельчения

## Раздел 3. Результаты испытаний

